



# Gebruiksaanwijzingen Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme

Versie L

129-0549-01  
9 september 2022

# inhoudsopgave

---

inhoudsopgave	2
Woordenlijst	3
Indicaties voor gebruik (VS)	4
Beoogd doel (EU)	5
Productomschrijving	5
Beoogd klinisch voordeel	5
Voorschriften	6
Algemene waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen	7
Verwachtingen	9
Hoe Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme werken	9
Mogelijk getoonde meldingen	9
Telefoonmelding	9
Melding Fitbit-app	10
Bedieningsinstructies	10
Compatibele apparaten en systeemvereisten	10
Meldingen van een onregelmatig ritme inschakelen	11
Gegevens en geschiedenis van een onregelmatig ritme bekijken	12
Meldingen van een onregelmatig ritme verwijderen	13
Meldingen van een onregelmatig ritme uitschakelen	13
Fitbit-app	13
fitbit.com	13
Problemen oplossen	13
Gegevensverzameling	13
Gegevensanalyse	14
Meldingen ontvangen	14
Klinische studie	14

Informatie over ziekten en zelfzorg	15
Servicevoorwaarden	17
Informatie gebruikersondersteuning	18

## Woordenlijst

---

### A

---

#### **Boezemfibrilleren (Afib)**

Boezemfibrilleren (afib) is een bepaald soort onregelmatig hartritme dat wordt veroorzaakt wanneer de bovenste hartkamers onregelmatig kloppen.

### C

---

#### **Consumentenproduct dat om de pols wordt gedragen**

Consumentenproducten voor om de pols omvatten Fitbit-smartwatches en -trackers.

### H

---

#### **Hartslag**

Je hartslag is het aantal keren dat je hart samentrekt (klopt) per minuut. Dit wordt vaak uitgedrukt als slagen per minuut (bpm).

### P

---

#### **Fotoplethysmografie (PPG)**

Fotoplethysmografie (PPG) is een op licht gebaseerde technologie die wordt gebruikt om de snelheid van de bloedstroom te detecteren.

#### **Hartslag**

Fitbit-smartwatches en -trackers hebben optische sensoren die bij elke hartslag het bloedvolume aan je pols meten. Dit bloedvolume wordt gebruikt om een schatting van de hartslag te maken (zie hierboven) en om een onregelmatige hartslag op te sporen.

# Indicaties voor gebruik (VS)

---

## VS\*:

Fitbit-meldingen van onregelmatige ritmes is een softwarematige, mobiele medische toepassing voor compatibele consumentenproducten die om de pols worden gedragen. De toepassing analyseert hartslaggegevens om momenten van onregelmatige hartritmes te identificeren die op boezemfibrilleren wijzen, waarna de gebruiker hiervan een melding ontvangt.

De Fitbit-functie Meldingen van een onregelmatig ritme is bedoeld voor over-the-countergebruik (otc). De functie is niet bedoeld om bij elk onregelmatig ritme dat zweemt naar boezemfibrilleren, een melding te geven. Bovendien, als je geen melding ontvangt, wil dat niet zeggen dat er geen ziekteproces gaande is. De Fitbit-functie Meldingen van een onregelmatig ritme is eerder bedoeld om een melding van mogelijk boezemfibrilleren te laten verschijnen wanneer er voldoende gegevens beschikbaar zijn voor een analyse.

Deze gegevens worden alleen geregistreerd als de gebruiker niet beweegt. Op basis van de risicofactoren van de gebruiker en de Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme kan worden overgegaan tot een screening op boezemfibrilleren. Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme zijn niet bedoeld ter vervanging van traditionele diagnose- of behandelmethoden.

Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme zijn niet getest voor en zijn niet bedoeld voor gebruik door mensen onder de 22 jaar. Ze zijn ook niet bedoeld voor gebruik door personen die eerder de diagnose boezemfibrilleren hebben gekregen.

## Niet-VS\*\*:

De software van Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme is bedoeld als indicatieve technologie voor een screening op boezemfibrilleren. De software wordt niet aanbevolen voor gebruikers bij wie al boezemfibrilleren is vastgesteld en is bedoeld voor niet-professioneel thuisgebruik door personen van minimaal 22 jaar.

*\* De indicaties voor gebruik voor de VS zijn van toepassing op de Verenigde Staten en de volgende Amerikaanse gebieden: Amerikaans Samoa, Puerto Rico, Guam, Amerikaanse Maagdeneilanden*

*\*\* De indicaties voor gebruik voor niet-VS zijn van toepassing op de volgende landen: België, Canada, Chili, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.*

*Er worden extra landen toegevoegd zodra de regelgevende vrijstellingen zijn verkregen. Raadpleeg [fitbit.com/irregular-rhythm](https://www.fitbit.com/irregular-rhythm) voor meer details.*

*Houd er rekening mee dat dit product niet onder medische hulpmiddelen valt in de volgende landen/regio's: Hongkong*

## Beoogd doel (EU)

---

Voor het analyseren van hartslaggegevens die zijn verkregen via PPG-sensoren (fotoplethysmografie) om onregelmatige hartritmes op te sporen die op boezemfibrilleren wijzen en de gebruiker hiervan op de hoogte te brengen.

## Productomschrijving

---

De functie Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme wordt gebruikt om hartslaggegevens bij te houden en te analyseren op onregelmatigheden die op boezemfibrilleren kunnen wijzen. Hartslaggegevens worden tijdelijk opgeslagen op je consumentenproduct dat om de pols wordt gedragen, totdat de gegevens met je account worden gesynchroniseerd. Als deze gegevens signalen van boezemfibrilleren vertonen, ontvang je een melding op je telefoon dat je de details van de bevindingen in de Fitbit-app kunt bekijken. De gegevens worden niet in realtime geanalyseerd en zijn niet bedoeld voor diagnostische doeleinden.

De functie kan in de Fitbit-app worden gevonden in de tegel Meldingen van een onregelmatig ritme, in het gedeelte Gezondheidsbeoordelingen. Deze tegel wordt ook gebruikt voor onboarding, het tonen van resultaten uit het verleden en andere niet-medische apparaatgegevens.

## Beoogd klinisch voordeel

---

Het primaire voordeel van de Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme is om gegevens van de hartslagsnelheid te analyseren om episodes van onregelmatige hartritmes te herkennen die consistent zijn met boezemfibrilleren en om daarover een melding te sturen naar de gebruiker.

# Voorschriften

---

De functie is niet getest voor en is niet bedoeld voor gebruik door mensen onder de 22 jaar. De functie is niet bedoeld voor gebruik door mensen die nu of in het verleden de diagnose boezemfibrilleren hebben gekregen.

---

# Algemene waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

---

**WIJZIG NIET** je medicatie voordat je met je arts hebt gesproken. De resultaten van de Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme zijn mogelijk niet correct bij mensen die medicijnen of middelen nemen die de hartslag of de doorbloeding beïnvloeden.

Gebruik dit product **NIET** in plaats van de behandeling die door je arts is voorgeschreven. Hartkloppingen en kortademigheid kunnen symptomen zijn van boezemfibrilleren. Sommige mensen hebben echter geen symptomen. Boezemfibrilleren is behandelbaar. Hoe sneller je het detecteert, hoe sneller jij en je arts er iets aan kunnen doen.

Als je een melding ontvangt, terwijl er geen boezemfibrilleren bij je is vastgesteld door een medisch specialist, moet je je huisarts raadplegen. Mogelijke valspositieve of valsnegatieve resultaten kunnen te wijten zijn aan apparaat- of gebruikersfouten. Ook wanneer je geen melding ontvangt, kun je boezemfibrilleren hebben. Fitbit controleert niet voortdurend op signalen van boezemfibrilleren. Wij kunnen je niet voor alle gevallen van een onregelmatig ritme die mogelijk op boezemfibrilleren duiden, een melding sturen. Ga voor meer informatie over de prestaties van Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme naar [Klinisch onderzoek](#).

Deze functie is niet getest op mensen met een pacemaker of implanteerbare cardioverter-defibrillator. Als je een van deze hulpmiddelen hebt, dien je eerst een arts te raadplegen voordat je deze functie gebruikt.

Gebruik het **NIET** voor klinische diagnose van boezemfibrilleren.

**NIET GEBRUIKEN** voor een ononderbroken reallimetiming van de hartslag.

Dit product **KAN NIET** een hartaanval, bloedproppen, een beroerte of andere hartaandoeningen detecteren.

De beoordeling die wordt uitgevoerd door dit product is **GEEN** diagnose.

Dit product is **NIET** bedoeld voor gebruik in een klinische omgeving.

**NIET GEBRUIKEN** voor het interpreteren of het ondernemen van klinische actie op basis van alleen de ontvangen melding, zonder raadpleging van een gekwalificeerde zorgprofessional.

Draag je consumentenproduct dat om de pols wordt gedragen volgens de instructies. Ga voor meer informatie naar [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

- Draag je apparaat iets hoger op je pols.
- Zorg dat je apparaat contact maakt met je huid.
- Je apparaat moet strak, maar niet beknellend zitten.

Er is een aantal factoren dat de nauwkeurigheid kan beïnvloeden van de analyse van hartslaggegevens voor signalen van boezemfibrilleren, waaronder de beweging van het lichaam, pols- of vingerbewegingen, tatoeages op de pols en een verminderde bloedtoevoer naar de pols.

**OPMERKING:** Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme kunnen alleen worden gebruikt op compatibele consumentenproducten die om de pols worden gedragen en die aan je account zijn gekoppeld. Ga voor meer informatie over consumentenproducten die om de pols worden gedragen en compatibel zijn met Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme naar [Gebruiksaanwijzingen](#)

Om veiligheidsredenen raden we je aan je compatibele consumentenproduct dat om de pols wordt gedragen en mobiele apparaten in eigen beheer en bezit te houden om ongeautoriseerde toegang tot je gezondheidsgegevens te voorkomen. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van je mobiele apparaat om de functie voor wachtwoordcodes in te schakelen om ongeautoriseerde toegang te bemoeilijken. Beveilig daarnaast je Fitbit-account met een sterk wachtwoord. Ga voor meer informatie naar [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com). We raden je aan om de apparaatvergrendeling in te schakelen, indien dit beschikbaar is op je consumentenproduct dat om de pols wordt gedragen. Ga voor meer informatie naar [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

Als je denkt dat dit product in strijd is met de wet of bedreigend is voor personen, vragen we je dit te rapporteren aan de fabrikant en je plaatselijke gezondheidsautoriteit.



# Verwachtingen

---

## Hoe Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme werken


De functie Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme verzamelt hartslag- en bewegingsgegevens om signalen van boezemfibrilleren te detecteren. Wanneer je deze functie inschakelt, worden je hartslaggegevens op de achtergrond verzameld, terwijl je niet beweegt of slaapt. Deze gegevens worden vervolgens op boezemfibrilleren geanalyseerd. Nadat je consumentenproduct dat om de pols wordt gedragen voldoende analyseerbare hartslaggegevens heeft verzameld, controleren we je hartslagmetingen op onregelmatigheden. Hartslagmetingen tonen aan hoe snel hartslagen elkaar opvolgen. Dit wordt meestal gemeten in milliseconden (ms) en omgezet in slagen per minuut (spm). Normaal gesproken zijn deze metingen vrij voorspelbaar en verlopen ze soepel. Grote verhogingen of verlagingen (meer dan 10 spm) in korte tijd kunnen als onregelmatig worden beschouwd.

## Mogelijk getoonde meldingen

Fitbit analyseert je gegevens niet in real time. Als je een melding ontvangt, betekent dit dat we signalen van een onregelmatige hartslag hebben waargenomen die mogelijk op boezemfibrilleren duiden. Je ontvangt maximaal één melding per dag.

## Telefoonmelding

Wanneer je meldingen van de Fitbit-app op je telefoon hebt ingeschakeld, zie je een melding op je telefoon:

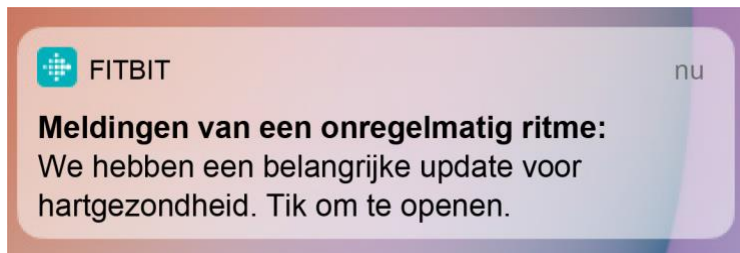

Tik op de melding om de Fitbit-app te openen.

## Melding Fitbit-app

Als je de Fitbit-app opent, zie je bovenaan het tabblad Vandaag een melding:



Tik op **Nu bekijken** om de metingen te bekijken waarin we signalen van een onregelmatig ritme hebben waargenomen of tik op het **X**-pictogram om de melding te sluiten.

## Bedieningsinstructies

### Compatibele apparaten en systeemvereisten

Meldingen van een onregelmatig ritme zijn op de volgende apparaten beschikbaar:

- Fitbit Charge 3 met firmwareversie 1.88.11 of hoger
- Fitbit Charge 4 met firmwareversie 44.1.100.43 of hoger
- Fitbit Charge 5 met firmwareversie 1.149.11 of hoger
- Fitbit Inspire 2 met firmwareversie 44.1.124.34 of hoger
- Fitbit Inspire 3 met firmwareversie 63.200001.179.13 of hoger
- Fitbit Luxe met firmwareversie 1.151.16 of 1.146.4 of hoger
- Fitbit Sense met firmwareversie 44.128.6.12 of hoger
- Fitbit Sense 2 met firmwareversie 60.20001.169.126 of hoger
- Fitbit Versa 2 met firmwareversie 35.72.1.9 of hoger
- Fitbit Versa 3 met firmwareversie 36.128.6.12 of hoger
- Fitbit Versa 4 met firmwareversie 61.20001.169.337 of hoger
- Fitbit Versa Lite Edition met firmwareversie 38.72.1.9 of hoger

Als een niet-compatibel apparaat wordt gekoppeld nadat de gebruiker met het kenmerk heeft ingestemd, analyseert het algoritme geen gegevens van een niet-compatibel apparaat.

Voor de Fitbit-app is iOS 15.5 of hoger of Android 12 of hoger vereist. Ga voor aanvullende informatie over de compatibiliteit van apparaten met de Fitbit-app naar [fitbit.com/global/us/technology/compatible-devices](https://fitbit.com/global/us/technology/compatible-devices).

Houd er rekening mee dat Fitbit-meldingen van een onregelmatig ritme momenteel op geselecteerde locaties beschikbaar zijn. Extra apparaten en landen worden toegevoegd zodra hiervoor de regelgevende vrijstellingen zijn verkregen. Raadpleeg [fitbit.com/irregular-rhythm](https://fitbit.com/irregular-rhythm) voor meer details.


## Meldingen van een onregelmatig ritme inschakelen

Meldingen van een onregelmatig ritme verschijnen in de Fitbit-app en als meldingen op je telefoon.

1. Op het tabblad Ontdekken  in de Fitbit-app op je telefoon tik je op **Beoordelingen en rapporten**.
2. Tik op de tegel **Meldingen van een onregelmatig ritme**.
3. Tik op **Nu instellen** en volg de instructies op het scherm.

## Gegevens en geschiedenis van een onregelmatig ritme bekijken

1. Op het tabblad Ontdekken  in de Fitbit-app op je telefoon tik je op **Beoordelingen en rapporten**.
2. Tik op de tegel **Meldingen van een onregelmatig ritme**.  
Als Fitbit signalen van onregelmatige hartritmes waarneemt, zie je een lijst van meldingen en wanneer deze hebben plaatsgevonden.

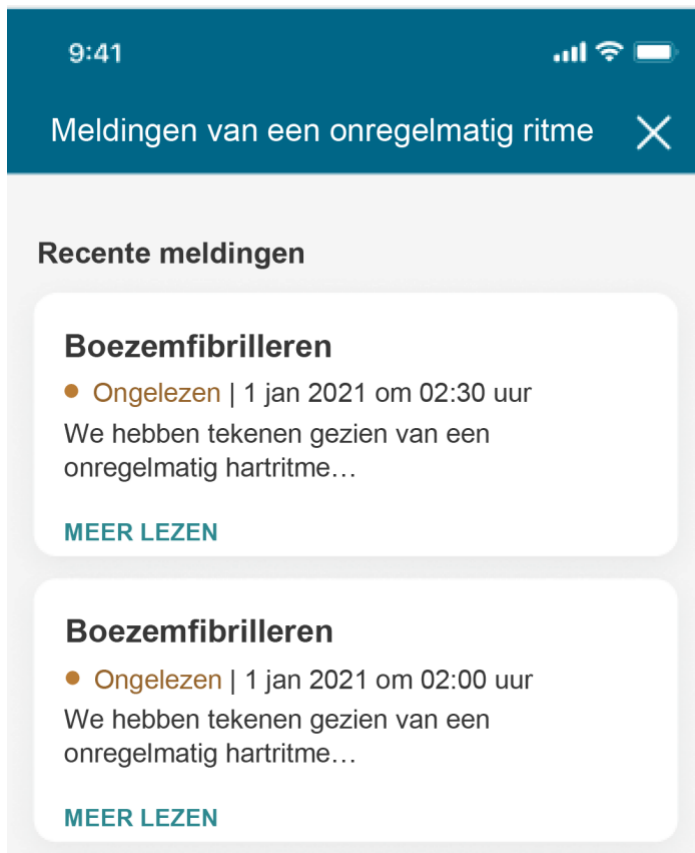


Houd er rekening mee dat elke melding als *Ongelezen* is gemarkeerd totdat je erop tikt om meer informatie te bekijken.

3. Tik op een melding voor gedetailleerde informatie. Er verschijnt een lijst met metingen van een onregelmatig ritme die zijn gemarkeerd met het tijdstip waarop de meting heeft plaatsgevonden en de minimale en maximale hartslag gedurende die tijdsperiode. Veeg omhoog om onderaan de pagina de samenvatting te bekijken, waarin de datum en het tijdstip van de eerste en laatste meting van een onregelmatig ritme worden vermeld, en wanneer de gegevens in de Fitbit-app zijn geregistreerd.

4. Tik op een meting van een onregelmatig ritme voor meer informatie. Er verschijnt een lijst met hartslagmetingen. Bij elke hartslag zie je een waarde voor het aantal slagen per minuut (spm) en een tijdstempel van wanneer deze heeft plaatsgevonden. De samenvatting bovenaan de pagina geeft de minimale en maximale geregistreerde spm-waarde weer.

## Meldingen van een onregelmatig ritme verwijderen

1. Op het tabblad Ontdekken  in de Fitbit-app op je telefoon tik je op **Beoordelingen en rapporten**.
2. Tik op de tegel **Meldingen van een onregelmatig ritme**.
3. Tik op de melding die je wilt verwijderen.
4. Veeg omhoog en tik onderaan de pagina op **Melding verwijderen > Ja, melding verwijderen**.

## Meldingen van een onregelmatig ritme uitschakelen

### Fitbit-app

1. Ga naar het tabblad Vandaag  in de Fitbit-app op je telefoon en tik op je profielfoto.
2. Tik op **Activiteit en gezondheid > Hartslaginstellingen > Meldingen van een onregelmatig ritme**.
3. Tik op **Deze functie uitschakelen > Uitschakelen**.

### fitbit.com

1. Open in een webbrowser [fitbit.com/afib-notifications/settings](https://fitbit.com/afib-notifications/settings). Log in op je Fitbit-account als hierom wordt gevraagd.
2. Tik op **Deze functie uitschakelen**.

## Problemen oplossen

---

### Gegevensverzameling

Fitbit kan je hartslaggegevens alleen op signalen van boezemfibrilleren controleren als je stilstaat. Draag je consumentenproduct dat om de pols wordt gedragen vaak, vooral tijdens het slapen. Synchroniseer je gegevens regelmatig, zodat signalen die op boezemfibrilleren duiden, effectiever kunnen worden opgespoord. We sturen alleen een melding als meerdere metingen signalen van een onregelmatig ritme laten zien. Dit houdt in dat het mogelijk is dat je geen meldingen van een onregelmatig ritme ontvangt als we dagelijks onvoldoende gegevens kunnen verzamelen.

Raadpleeg voor het oplossen van problemen met hartslagmetingen [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

# Gegevensanalyse

Fitbit analyseert je gegevens niet in real time. Houd de Fitbit app actief op de achtergrond van je telefoon, zodat je consumentenproduct dat om de pols wordt gedragen regelmatig kan synchroniseren. Zo controleer je wanneer je hartslaggegevens voor het laatst zijn geanalyseerd:

1. Op het tabblad Ontdekken  in de Fitbit-app op je telefoon tik je op **Beoordelingen en rapporten**.
2. Tik op de tegel **Meldingen van een onregelmatig ritme**.  
De datum en het tijdstip waarop je gegevens voor het laatst zijn geanalyseerd, verschijnen onder je meldingsgeschiedenis.



Houd er rekening mee dat gegevens op je consumentenproduct dat om de pols wordt gedragen zeven dagen worden bewaard. Wanneer je meer dan zeven dagen niet met de Fitbit-app hebt gesynchroniseerd, worden oudere gegevens mogelijk verwijderd en niet geanalyseerd.

Raadpleeg voor het oplossen van problemen met synchroniseren [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

## Meldingen ontvangen

Als je telefoon geen pushmeldingen van de Fitbit-app ontvangt:

- Schakel in de instellingen van je telefoon meldingen voor de Fitbit-app in. Ga voor instructies naar [support.google.com](https://support.google.com) voor Android-telefoons of naar [support.apple.com](https://support.apple.com) voor iPhones.
- Controleer of de Fitbit-app op je telefoon is bijgewerkt. Ga voor instructies naar [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

## Klinische studie

Er is een klinische studie uitgevoerd om te valideren dat boezemfibrilleren (Afib) kan worden gedetecteerd met het software-algoritme van de Fitbit-functie Meldingen van onregelmatig ritme

(IRN) via gegevens die zijn verzameld van consumentenproducten die om de pols worden gedragen. Er namen 455.699 proefpersonen deel aan het Fitbit-onderzoek naar de validatie van software voor de beoordeling van boezemfibrilleren aan de hand van PPG-gegevens die zijn verkregen met een draagbare smartwatch (NCT04380415). 4.728 proefpersonen kregen een melding over onregelmatig ritme en die personen zijn uitgenodigd om een ECG-pleister (elektrocardiogram) te ontvangen en te dragen. 1.057 van hen zijn 7 dagen via de ECG-pleister gemonitord en hebben de pleister geretourneerd met bruikbare gegevens. Op basis van de gemonitorde resultaten na 7 dagen dragen van de ECG-pleister was de prevalentie van boezemfibrilleren 32,2% (340/1057).

Door het software-algoritme van de Fitbit-functie Meldingen van onregelmatig ritme zijn bij 225 proefpersonen tekenen van Afib waargenomen terwijl zij een ECG-pleister droegen na een eerste IRN-melding. Van hen werd bij 98,2% (221/225) boezemfibrillaties waargenomen via het software-algoritme van de Fitbit-functie Meldingen van onregelmatig ritme en via de ECG-pleister, beide op ongeveer dezelfde tijd. Tijdens de klinische studie zijn geen ernstige bijwerkingen waargenomen.

## Informatie over ziekten en zelfzorg

---

### Wat is boezemfibrilleren?

Boezemfibrilleren (afib) is een bepaald soort onregelmatig hartritme van de bovenste hartkamers (de boezems). Normaal gesproken trekken de bovenste kamers regelmatig samen om bloed naar de onderste kamers te pompen. Bij boezemfibrilleren trekken de bovenste kamers onregelmatig samen, waardoor bloed langzaam in de bovenste kamers beweegt. Dit langzaam bewegende bloed kan gaan stollen, waardoor het risico op een beroerte en aandoeningen aan het hart toeneemt.

### Signalen van mogelijk boezemfibrilleren

Sommige mensen met boezemfibrilleren hebben geen symptomen, maar anderen kunnen het volgende ervaren:

- Onregelmatige hartslag
- Hartkloppingen
- Licht gevoel in het hoofd
- Extreme vermoeidheid
- Kortademigheid
- Pijn in de borst

Meer informatie vind je op de website van het [CDC](https://www.cdc.gov/) [https://www.cdc.gov/], de [American Heart Association](https://www.heart.org/) [https://www.heart.org/] of de European Society of Cardiology [https://www.escardio.org/].

# Levensstijl en andere factoren

Risicofactoren voor boezemfibrilleren omvatten:

- Hoge leeftijd
- Hoge bloeddruk
- Obesitas
- Europese afkomst
- Diabetes
- Hartfalen
- Ischemische hartaandoeningen
- Hyperthyreoïdie
- Chronische nierziekte
- Zwaar alcoholgebruik
- Vergroting van de kamers aan de linkerkant van het hart

Meer informatie vind je op de website van het [CDC](https://www.cdc.gov/) [https://www.cdc.gov/], de [American Heart Association](https://www.heart.org/) [https://www.heart.org/] of de European Society of Cardiology [https://www.escardio.org/].

# Potentiële behandelingsopties

Raadpleeg je zorgverlener voordat je grote veranderingen in je levensstijl of medicatie aanbrengt. Potentiële behandelingsopties omvatten:

- Medicatie
- Operaties
- Veranderingen in levensstijl

Meer informatie vind je op de website van het [CDC](https://www.cdc.gov/) [https://www.cdc.gov/], de [American Heart Association](https://www.heart.org/) [https://www.heart.org/] of de European Society of Cardiology [https://www.escardio.org/].



# Servicevoorwaarden

---

Fitbit ontwerpt producten en hulpmiddelen die u helpen uw gezondheids- en conditiedoelen te bereiken, en u motiveren en inspireren om gezonder en actiever te leven. Deze Servicevoorwaarden ('Voorwaarden') zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Fitbit-service. De 'Fitbit-service' omvat onze apparaten inclusief de bijbehorende firmware, applicaties, software, websites, API's, producten en diensten.

Als je woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, zijn deze Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Fitbit International Limited, een Iers bedrijf met statutaire zetel te 76 Lower Baggot Street, Dublin 2, Ierland. Als je elders woonachtig bent, zijn deze Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Fitbit, Inc., 199 Fremont Street, 14th Floor, San Francisco, CA 94105 U.S.A. Wanneer in de Voorwaarden wordt verwezen naar 'Fitbit', 'wij', 'we', 'ons' of 'onze', wordt verwezen naar de partij bij je overeenkomst die je voorziet van de Fitbit-service.

U moet deze Voorwaarden accepteren om een Fitbit-account aan te maken en toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Fitbit-service. Als u geen account hebt, wordt u verondersteld met deze Voorwaarden akkoord te gaan door enig deel van de Fitbit-service te gebruiken. Maak geen account aan of maak geen gebruik van de Fitbit-service als u niet met deze Voorwaarden instemt.

Aanvullende informatie over deze Voorwaarden kan worden verkregen door naar de [Servicevoorwaarden van Fitbit](#) te gaan.

# Informatie gebruikersondersteuning

Dit document is voor SKU: FB604-versie 1.0-1.0-1.0 of hoger.



Fitbit LLC  
199 Fremont St. 14th Floor  
San Francisco, CA 94105  
Verenigde Staten  
www.fitbit.com






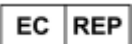


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP Den Haag  
Nederland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
6302 Zug  
Zwitserland



## Apparaatsymbolen

 CE- markering	 Lees de gebruiksaanw ijzing	 Fabrikant	 Europese gevolmachtig de vertegenwo rdiger	 Zwitserse gevolmachtig de vertegenwo rdiger	 Medisch hulpmiddel
---	--	--	---	--	--

Ga voor de klantenservice naar [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

Zoals vereist door toepasselijke wetgeving, is er in bepaalde regio's op aanvraag een gedrukte kopie van dit document beschikbaar. [Neem contact met ons op](#) voor meer informatie.

©2022 Fitbit LLC. Alle rechten voorbehouden. Fitbit en het Fitbit-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Fitbit in de Verenigde Staten en in andere landen. Een volledige lijst met handelsmerken van Fitbit staat op de [overzichtspagina van Fitbit-handelsmerken](#). Vermelde handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.