



fitbit®

Instrucțiuni de utilizare
pentru notificări Fitbit
privind ritmul cardiac neregulat

Versiunea L

129-0549-01
9 septembrie 2022

Cuprins

| | |
|---|----|
| Cuprins | 2 |
| Glosar | 3 |
| Indicații de utilizare (SUA) | 4 |
| Destinația de utilizare (UE) | 5 |
| Descrierea produsului | 5 |
| Beneficiul clinic prevăzut | 5 |
| Măsuri de precauție | 6 |
| Avertismente și precauții generale | 7 |
| Așteptări | 9 |
| Cum funcționează notificările Fitbit privind ritmul cardiac neregulat | 9 |
| Notificări pe care s-ar putea să le vezi | 9 |
| Notificare pe telefon | 9 |
| Notificarea aplicației Fitbit | 10 |
| Instrucțiuni de operare | 11 |
| Dispozitive compatibile și cerințe de sistem | 11 |
| Activare notificări privind ritmul cardiac neregulat | 11 |
| Vizualizare detalii și istoric privind ritmul cardiac neregulat | 12 |
| Ștergere notificări privind ritmul cardiac neregulat | 13 |
| Dezactivare notificări privind ritmul cardiac neregulat | 13 |
| Aplicație Fitbit | 13 |
| fitbit.com | 13 |
| Depanare | 13 |
| Colectare date | 13 |
| Analiză de date | 14 |
| Primire notificări | 14 |
| Studiul clinic | 15 |

| | |
|--|----|
| Informații despre boli și îngrijirea personală | 15 |
| Termeni și Condiții | 17 |
| Informații privind asistența utilizatorului | 18 |

Glosar

A

Fibrilație atrială (FibA)

Fibrilația atrială (FibA) este un tip de ritm cardiac neregulat, cauzat atunci când camerele superioare ale inimii bat neregulat.

C

Produs de purtat la încheietura mâinii

Produsele de purtat la încheietura mâinii includ smartwatch-urile Fitbit și tracker-ele Fitbit.

H

Ritm cardiac

Ritm cardiac înseamnă de câte ori inima ta se contractă (bate) într-un minut. De multe ori este exprimat ca bătăi pe minut (bpm).

P

Fotopletismografie (PPG)

Fotopletismografia (PPG) este o tehnologie bazată pe lumină, utilizată pentru a detecta rata fluxului sanguin.

Puls

Smartwatch-urile și trackerele Fitbit dispun de senzori optici care pot detecta pulsul sângelui care ajunge la încheietura mâinii cu fiecare bătaie a inimii. Pulsul este utilizat pentru a estima ritmul cardiac (vezi mai sus) și pentru a căuta nereguli la nivelul măsurătorilor între bătăi.

Indicații de utilizare (SUA)

SUA*:

Notificările Fitbit privind ritmul cardiac neregulat reprezintă o aplicație medicală pentru mobil, numai pentru software, destinată să fie utilizată cu produsele purtate la încheietura mâinii, pentru a analiza datele despre puls, astfel încât să depisteze episoadele de ritm cardiac neregulat, care ar putea fi un indicator al fibrilației atriale (FibA) și furnizează o notificare către utilizator.

Notificările Fitbit pentru ritmul cardiac neregulat sunt destinate utilizării fără prescripție medicală (OTC). Acestea nu sunt destinate furnizării unei notificări cu ocazia fiecărui episod de ritm cardiac neregulat care sugerează FibA, iar absența unei notificări nu este destinată să indice că nu este prezent niciun proces de boală; mai degrabă, Notificările Fitbit pentru ritmul cardiac neregulat sunt destinate să scoată la suprafață o notificare de FibA posibilă când sunt disponibile suficiente date pentru analiză.

Aceste date sunt captate numai când utilizatorul stă nemișcat. Împreună cu factorii de risc ai utilizatorului, Notificările Fitbit privind ritmul cardiac neregulat pot fi utilizate pentru a suplimenta decizia de screening FibA. Notificările Fitbit privind ritmul cardiac neregulat nu sunt destinate înlocuirii metodelor tradiționale de diagnostic sau tratament.

Notificările Fitbit privind ritmul cardiac neregulat nu au fost testate pentru și nu sunt destinate să fie utilizate de către persoanele cu vârsta sub 22 de ani. De asemenea, nu sunt destinate utilizării de către persoanele diagnosticate anterior cu FibA.

În afara SUA**:

Software-ul Notificări Fitbit privind ritmul cardiac neregulat este destinat ca tehnologie pre-screening pentru fibrilația atrială. Software-ul nu este recomandat utilizatorilor cu cazuri cunoscute de fibrilație atrială și este destinat utilizării la domiciliu de către persoanele nespecializate în vârstă de peste 22 de ani.

** Indicațiile de utilizare se aplică la nivelul Statelor Unite și al următoarelor teritorii SUA: Samoa Americană, Puerto Rico, Guam, Insulele Virgine Americane*

*** Indicațiile de utilizare în afara SUA se aplică următoarelor țări: Austria, Belgia, Canada, Chile, Republica Cehă, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Spania, Suedia, Elveția și Regatul Unit.*

Alte țări vor fi adăugate pe măsură ce se obține autorizarea autorității de reglementare. Consultă fitbit.com/irregular-rhythm pentru detalii suplimentare.

Reține că acest produs nu este reglementat ca dispozitiv medical în următoarele țări/regiuni: Hong Kong

Destinația de utilizare (UE)

Pentru a analiza datele despre puls colectate de la senzorii de fotoplețismografie (PPG) pentru a identifica episoadele de ritmuri cardiace neregulate, care sugerează fibrilația atrială (FibA) și furnizează o notificare către utilizator.

Descrierea produsului

Funcția Notificări Fitbit privind ritmul cardiac neregulat este utilizată pentru a monitoriza și a analiza datele despre puls pentru nereguli în măsurătorile între bătăi, care pot să indice prezența FibA. Datele despre ritmul cardiac sunt stocate temporar pe produsul purtat la încheietura mâinii până când datele se sincronizează cu contul tău. Dacă în cadrul datelor se regăsesc semne de FibA, vei primi o notificare pe telefon pentru a vizualiza detaliile rezultatelor în aplicația Fitbit. Datele nu sunt analizate în timp real și nu sunt destinate scopurilor de diagnosticare.

Caracteristica poate fi regăsită în pictograma Notificări privind ritmul cardiac neregulat din cadrul secțiunii Evaluări de sănătate din aplicația Fitbit. Această pictogramă este utilizată de asemenea pentru integrare, afișarea rezultatelor anterioare și alte date specifice unui dispozitiv non-medical.

Beneficiul clinic prevăzut

Beneficiul primar al Notificărilor Fitbit privind ritmul neregulat este de a analiza datele privind pulsul pentru a identifica episoadele de ritm cardiac neregulat, care coincid fibrilației atriale și de a trimite notificare utilizatorului.

Măsuri de precauție

Caracteristica nu a fost testată pentru și nu este destinată utilizării la persoanele cu vârsta sub 22 de ani. Caracteristica nu este destinată utilizării pentru persoanele care au un istoric sau diagnostic de fibrilație atrială.

Avertismente și precauții generale

NU schimba medicația fără a consulta mai întâi medicul. Este posibil ca rezultatele Notificărilor Fitbit privind ritmul cardiac neregulat să nu fie precise în cazul persoanelor care iau medicamente sau substanțe care afectează ritmul cardiac sau fluxul sanguin.

NU folosi acest produs în locul tratamentului prescris de medicul tău. Palpitațiile și dispneea pot să reprezinte simptome de FibA, dar unele persoane sunt asimptomatice. FibA este tratabilă, deci, cu cât o descoperi mai devreme, cu atât mai repede tu și medicul tău puteți să luați măsuri.

Dacă primești o notificare și nu ai fost diagnosticat(ă) cu FibA de către un medic, trebuie să discuți cu medicul tău. Pot apărea rezultate fals negative sau fals pozitive eronate din cauza erorii dispozitivului sau a utilizatorului. Dacă nu primești o notificare, este posibil să ai în continuare FibA. Fitbit nu caută întotdeauna semne de FibA. Nu îți putem trimite notificări pentru toate cazurile de ritm cardiac neregulat care pot indica FibA. Pentru mai multe informații despre performanța Notificărilor Fitbit privind ritmul cardiac neregulat, consultă [Studiul clinic](#).

Această caracteristică a fost testată pe persoanele cu stimulator cardiac sau un defibrilator cardioverter implantabil. Dacă ai unul dintre aceste dispozitive, te rugăm să te consulți cu un medic înainte de a utiliza această caracteristică.

NU trebuie să fie folosită pentru diagnosticarea clinică a FibA.

NU trebuie să fie folosită pentru monitorizarea continuă, în timp real, a ritmului cardiac.

Acest produs **NU POATE** să detecteze atacul de cord, cheagurile de sânge, accidentul vascular cerebral sau alte afecțiuni cardiace.

Evaluarea realizată de acest produs **NU** este un diagnostic.

Acest produs **NU** este destinat utilizării într-un mediu clinic.

NU interpreta și nu lua măsuri clinice numai în baza notificării, fără a consulta un profesionist calificat din domeniul sănătății.

Poartă produsul de purtat la încheietura mâinii, conform instrucțiunilor. Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.

- Poartă dispozitivul puțin mai sus pe încheietura mâinii.
- Asigură-te că dispozitivul intră în contact cu pielea.
- Dispozitivul trebuie să fie fix, dar să nu te strângă.

O serie de factori pot afecta precizia datelor despre puls utilizate pentru a căuta semne de FibA, inclusiv mișcarea corpului, a încheieturii mâinii sau mișcările degetelor, tatuajele de la încheietura mâinii și fluxul sanguin scăzut la încheietura mâinii.

NOTĂ: Notificările Fitbit privind ritmul cardiac neregulat pot fi utilizate doar pe dispozitivele compatibile care au fost conectate la contul tău. Pentru mai multe informații despre produsele purtate la încheietura mâinii, compatibile cu Notificările Fitbit privind ritmul cardiac neregulat, consultă [Instrucțiunile de utilizare](#).

Din motive de securitate, este recomandabil să menții controlul și posesia produsului compatibil purtat la încheietura mâinii și a dispozitivelor mobile compatibile pentru a preveni accesul neautorizat la informațiile tale despre sănătate. Consultă instrucțiunile producătorului dispozitivului mobil pentru a activa funcția de parolă, pentru a împiedica accesul neautorizat. În plus, securizează contul tău Fitbit cu o parolă puternică. Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com. Dacă este disponibilă pe produsul tău purtat la încheietura mâinii, îți recomandăm să activezi blocarea dispozitivului. Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.

În cazul în care consideri că produsul încalcă orice legi sau reprezintă o amenințare la adresa unui individ, te rugăm să raportezi producătorului și autorității locale în materie de sănătate.

Așteptări

Cum funcționează notificările Fitbit privind ritmul cardiac neregulat

Caracteristica Notificări Fitbit privind ritmul cardiac neregulat colectează date despre ritmul cardiac și mișcări pentru a verifica dacă există semne de FibA. Când activezi caracteristica, datele despre ritmul cardiac sunt colectate în fundal, în timp ce stai nemișcat(ă) sau dormi și sunt analizate pentru a detecta dacă există semne de FibA. După ce produsul purtat la încheietura mâinii colectează suficiente date analizabile despre ritmul cardiac, analizăm măsurătorile între bătăi pentru a verifica dacă există nereguli. Măsurătorile între bătăi indică frecvența cu care bătăile inimii se succed reciproc. De obicei, se măsoară în milisecunde (ms) și sunt convertite în bătăi pe minut (bpm). În mod normal, aceste măsurători sunt relativ previzibile și line. Creșterile sau scăderile semnificative (de peste 10 bpm) într-o perioadă scurtă de timp pot fi considerate neregulate.

Notificări pe care s-ar putea să le vezi

Fitbit nu analizează datele tale în timp real. Dacă primești o notificare, înseamnă că am observat semne de ritm neregulat care pot constitui FibA în mai multe citiri. Poți primi până la 1 notificare în fiecare zi.

Notificare pe telefon

Dacă permiți notificările din aplicația Fitbit pe telefonul tău, vei vedea o notificare pe telefon:



Atinge notificarea de pe ecran pentru a deschide aplicația Fitbit.

Notificarea aplicației Fitbit

Când deschizi aplicația Fitbit, vei vedea o notificare în partea de sus a filei Astăzi:



Atinge **Vizualizare acum** de pe ecran pentru a vedea citirile când am observat semne de ritm cardiac neregulat, sau atinge pictograma **X** de pe ecran pentru a înlătura notificarea.

Instrucțiuni de operare

Dispozitive compatibile și cerințe de sistem

Notificările privind ritmul neregulat sunt disponibile pe:

- Fitbit Charge 3 care rulează versiunea firmware 1.88.11 sau o versiune superioară
- Fitbit Charge 4 care rulează versiunea firmware 44.1.100.43 sau o versiune superioară
- Fitbit Charge 5 care rulează versiunea firmware 1.149.11 sau o versiune superioară
- Fitbit Inspire 2 care rulează versiunea firmware 44.1.124.34 sau o versiune superioară
- Fitbit Inspire 3 care rulează versiunea firmware 63.200001.179.13 sau o versiune superioară
- Fitbit Luxe care rulează versiunea firmware 1.151.16 or 1.146.4 sau o versiune superioară
- Fitbit Sense care rulează versiunea firmware 44.128.6.12 sau o versiune superioară
- Fitbit Sense 2 care rulează versiunea firmware 60.20001.169.126 sau o versiune superioară
- Fitbit Versa 2 care rulează versiunea firmware 35.72.1.9 sau o versiune superioară sau o versiune superioară
- Fitbit Versa 3 care rulează versiunea firmware 36.128.6.12 sau o versiune superioară
- Fitbit Versa 4 care rulează versiunea firmware 61.20001.169.337 sau o versiune superioară
- Fitbit Versa Lite Edition care rulează versiunea firmware 38.72.1.9 sau o versiune superioară


Dacă un dispozitiv incompatibil este asociat după ce utilizatorul și-a oferit consimțământul cu privire la caracteristică, algoritmul nu va analiza datele de pe un dispozitiv incompatibil.

Aplicația Fitbit necesită iOS 15.5 sau o versiune superioară sau Android 12 sau o versiune superioară. Pentru informații suplimentare despre compatibilitatea dispozitivului cu aplicația Fitbit, consultă fitbit.com/global/us/technology/compatible-devices.


Reține că Notificările Fitbit privind ritmul cardiac neregulat sunt disponibile numai în locațiile selectate în acest moment. Dispozitive suplimentare și alte țări vor fi adăugate pe măsură ce se obține autorizarea autorității de reglementare. Consultă fitbit.com/irregular-rhythm pentru detalii suplimentare.

Activare notificări privind ritmul cardiac neregulat

Notificările privind ritmul cardiac neregulat apar în aplicația Fitbit și ca notificare pe telefonul tău.

1. Din fila Descoperă  din aplicația Fitbit de pe telefon, atinge **Evaluări și rapoarte** de pe ecran.
2. Atinge pictograma **Notificări privind ritmul cardiac neregulat** de pe ecran.
3. Atinge **Configurează acum** de pe ecran și urmează instrucțiunile de pe ecran.

Vizualizare detalii și istoric privind ritmul cardiac neregulat


1. Din fila Descoperă  din aplicația Fitbit de pe telefon, atinge **Evaluări și rapoarte** de pe ecran.
2. Atinge pictograma **Notificări privind ritmul cardiac neregulat** de pe ecran. Dacă Fitbit detectează semne de ritmuri cardiace neregulate, vei vedea o listă de notificări și momentul în care acestea au apărut.



Reține că fiecare notificare este marcată ca *Necitită* până când o atingi pe ecran pentru a vizualiza mai multe informații.


3. Atinge o notificare de pe ecran pentru informații detaliate. Apare o listă cu citiri ale ritmului cardiac neregulat, marcată cu momentul în care a apărut citirea și ritmul cardiac minim și maxim în perioada de timp respectivă. Glisează în sus pentru a vedea un rezumat în partea de jos a paginii, care listează data și ora primei citiri a ritmului cardiac neregulat, a ultimei citiri a ritmului cardiac neregulat și momentul în care datele au fost înregistrate în aplicația Fitbit.
4. Atinge o citire a ritmului cardiac neregulat pentru informații suplimentare. Apare o listă cu măsurătorile între bătăi. Fiecare bătaie a inimii are o valoare bpm și un marcaj temporal al momentului în care a apărut. Rezumatul din partea de sus afișează valoarea bpm minimă și maximă înregistrată.

Ștergere notificări privind ritmul cardiac neregulat

1. Din fila Descoperă  din aplicația Fitbit de pe telefon, atinge **Evaluări și rapoarte** de pe ecran.
2. Atinge pictograma **Notificări privind ritmul cardiac neregulat** de pe ecran.
3. Atinge notificarea de pe ecran pe care dorești să o ștergi.
4. Glisează în sus și atinge **Ștergere notificare** din partea de jos a paginii > **Da, șterge notificarea.**

Dezactivare notificări privind ritmul cardiac neregulat

Aplicație Fitbit

1. Din fila Astăzi  din aplicația Fitbit de pe telefon, atinge imaginea ta de profil de pe ecran.
2. Atinge **Activitate și wellness > Setări cardio > Notificări privind ritmul neregulat** de pe ecran.
3. Atinge **Dezactivează această caracteristică > Dezactivare** de pe ecran.

fitbit.com

1. Cu ajutorul unui browser web, deschide fitbit.com/afib-notifications/settings. Dacă îți se cere, conectează-te la contul Fitbit.
2. Atinge **Dezactivează această caracteristică** de pe ecran.

Depanare


Colectare date

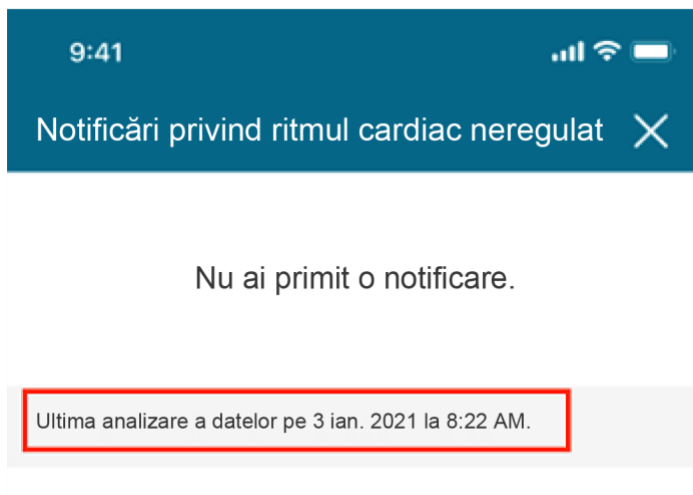
Fitbit poate să analizeze doar datele despre ritmul cardiac pentru FibA atunci când stai nemișcat(ă). Poartă frecvent produsul de purtat la încheietura mâinii, în special la culcare, și sincronizează frecvent datele pentru a ajuta la căutarea semnelor de FibA într-un mod mai eficient. Trimitem o notificare doar pentru a vedea semne de ritm neregulat în mai multe citiri, ceea ce înseamnă că s-ar putea să nu primești notificări privind ritmul cardiac neregulat dacă nu ai putut să colectezi suficiente date în fiecare zi.

Pentru a depana monitorizarea ritmului cardiac, consultă help.fitbit.com.

Analiză de date

Fitbit nu analizează datele tale în timp real. De pe telefon, menține funcționarea aplicației Fitbit în fundal, pentru a te asigura că produsul de consum purtat la încheietura mâinii se poate sincroniza în mod regulat. Pentru a verifica momentul în care datele tale despre ritmul cardiac au fost analizate ultima oară:

1. Din fila Descoperă  din aplicația Fitbit de pe telefon, atinge **Evaluări și rapoarte** de pe ecran.
2. Atinge pictograma **Notificări privind ritmul cardiac neregulat** de pe ecran. Ora și data la care au fost analizate datele tale ultima oară apar sub istoricul de notificări.



Reține că datele sunt stocate timp de 7 zile pe produsul purtat la încheietura mâinii. Dacă nu ai efectuat sincronizarea cu aplicația Fitbit de peste 7 zile, datele mai vechi ar putea fi șterse și nu vor fi analizate.

Pentru a depana sincronizarea, consultă help.fitbit.com.

Primire notificări

Dacă telefonul tău nu primește notificări push de la aplicația Fitbit:

- Activează notificările pentru aplicația Fitbit din setările telefonului tău. Pentru instrucțiuni, consultă support.google.com pentru telefoanele Android sau support.apple.com pentru dispozitivele iPhone.
- Verifică dacă este actualizată aplicația Fitbit de pe telefonul tău. Pentru instrucțiuni, consultă help.fitbit.com.

Studiul clinic

A fost desfășurat un studiu clinic pentru a valida abilitatea algoritmului software al Notificărilor Fitbit privind ritmul cardiac neregulat (IRN) de a detecta fibrilația atrială (FibA), utilizând datele colectate de pe produsele purtate la încheietura mâinii. Validarea software-ului de către Fitbit pentru evaluarea fibrilației atriale din datele PPG obținute în urma unui studiu privind smartwatch-urile care pot fi purtate Studiul (NCT04380415) a inclus 455.699 subiecți. Au existat 4.728 subiecți care au primit o notificare privind ritmul cardiac neregulat și au fost invitați să primească și să poarte un platură de electrocardiogramă (ECG). Dintre aceștia, 1.057 au purtat și au returnat un monitor cu platură ECG pentru 7 zile cu date utilizabile. Prevalența FibA pe baza rezultatelor monitorizării platurii ECG pe 7 zile a fost de 32,2% (340/1057).

Algoritmul software al notificărilor Fitbit privind ritmul cardiac neregulat a detectat semne de FibA la 225 de subiecți în timp ce aceștia purtau un platură ECG după o notificare IRN inițială. Dintre aceștia, 98,2% (221/225) au indicat detectări de FibA din algoritmul software al notificărilor Fitbit privind ritmul cardiac neregulat și platurile ECG aproximativ în același moment. În timpul studiului clinic, nu au fost observate evenimente adverse grave.

Informații despre boli și îngrijirea personală

Ce este fibrilația atrială?

Fibrilația atrială (FibA) este un tip de ritm cardiac neregulat al camerelor superioare ale inimii (atriul). În mod normal, camerele superioare se contractă cu regularitate pentru a deplasa sângele în camerele inferioare. Cu FibA, camerele superioare se contractă cu regularitate, determinând o parte din sânge să se deplaseze lent în camerele superioare. Acest sânge care se deplasează lent poate să formeze cheaguri, ceea ce sporește riscul de accident vascular cerebral și afecțiuni cardiace.

Semne că poți să ai fibrilație atrială

Unele persoane cu FibA pot să fie asimptomatice, în timp ce altele pot să prezinte următoarele simptome:

- Ritm cardiac neregulat
- Palpitații
- Amețeală
- Oboseală extremă
- Respirație cu dificultate
- Dureri în piept

Află mai multe de la [CDC](https://www.cdc.gov/) [https://www.cdc.gov/], [Asociația Americană de Cardiologie](https://www.heart.org/) [https://www.heart.org/] sau accesând site-ul web al Societății Europene de Cardiologie [https://www.escardio.org/].

Modul de viață și alți factori

Printre factorii de risc pentru FibA se numără:

- Vârsta avansată
- Tensiunea arterială ridicată
- Obezitatea
- Originea europeană
- Diabetul
- Insuficiența cardiacă
- Bolile cardiace ischemice
- Hipertiroidismul
- Afecțiunile renale cronice
- Consumul excesiv de alcool
- Creșterea ca mărime a camerelor din partea stângă a inimii

Află mai multe de la [CDC](https://www.cdc.gov/) [https://www.cdc.gov/], [Asociația Americană de Cardiologie](https://www.heart.org/) [https://www.heart.org/] sau accesând site-ul web al Societății Europene de Cardiologie [https://www.escardio.org/].

Potențiale opțiuni de tratament

Consultă furnizorul de servicii medicale înainte de a face modificări majore ale modului de viață sau ale medicației. Printre posibilele opțiuni de tratament se numără:

- Medicamente
- Intervenție chirurgicală
- Schimbarea modului de viață

Află mai multe de la [CDC](https://www.cdc.gov/) [https://www.cdc.gov/], [Asociația Americană de Cardiologie](https://www.heart.org/) [https://www.heart.org/] sau accesând site-ul web al Societății Europene de Cardiologie [https://www.escardio.org/].

Termeni și Condiții

Fitbit creează dispozitive și instrumente care te ajută să îți atingi obiectivele de fitness și îți oferă motivația și inspirația de a duce o viață mai sănătoasă și mai activă. Aceste condiții de furnizare a serviciului („condițiile”) se aplică accesării și folosirii serviciului Fitbit. „Serviciul Fitbit” include dispozitivele noastre inclusiv firmware-ul, aplicațiile, aplicațiile software, site-urile web, API, produsele și serviciile.

Dacă trăiești în Spațiul Economic European, Regatul Unit sau Elveția, aceste condiții reprezintă un contract încheiat între tine și Fitbit International Limited, societate din Irlanda, cu sediul social în 76 Lower Baggot Street, Dublin 2, Irlanda. Dacă locuiești în altă parte, aceste condiții reprezintă un contract încheiat între tine și Fitbit LLC, 199 Fremont Street, 14th Floor, San Francisco, CA 94105 SUA. Atunci când aceste condiții menționează „Fitbit”, „noi” sau „nostru”, se referă la partea contractantă care îți furnizează serviciile Fitbit.

Trebuie să accepți aceste condiții pentru a crea un cont Fitbit și a accesa sau folosi serviciul Fitbit. Dacă nu ai un cont, acceptă aceste condiții folosind orice parte a serviciului Fitbit. Dacă nu accepți aceste condiții, nu crea un cont și nu folosi serviciul Fitbit.

Informații suplimentare despre aceste condiții sunt disponibile în [Condițiile de furnizare a serviciului Fitbit](#).

Informații privind asistența utilizatorului

Acest document este pentru SKU: FB604 versiunea 1.0-1.0-1.0 sau o versiune superioară.



Fitbit LLC
199 Fremont St. 14th Floor
San Francisco, CA 94105
Statele Unite
www.fitbit.com







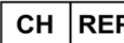

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP Haga
Țările de Jos



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Elveția



Simbolurile echipamentului

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
|  Marcaj CE |  Citește instrucțiunile de utilizare |  Producător |  Reprezentan t autorizat în Europa |  Reprezentant autorizat în Elveția |  Dispozitiv medical |
|--|--|---|--|--|--|

Pentru asistență clienți, vizitați help.fitbit.com.

După cum se impune de reglementările în vigoare, un exemplar tipărit din acest document este disponibil gratuit în anumite regiuni, la cerere. Pentru mai multe informații, [contactează-ne](#).

©2022 Fitbit LLC. Toate drepturile rezervate. Fitbit și sigla Fitbit sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Fitbit în SUA și în alte țări. O listă mai cuprinzătoare cu mărcile comerciale Fitbit se regăsește pe [Lista cu mărcile comerciale Fitbit](#). Mărcile comerciale terțe menționate aparțin proprietarilor respectivi.